

Finecare Vet (YG-101)

Wondfo®



Il lettore **Finecare Vet YG-101** utilizza una tecnologia in immunofluorescenza per processare monotest per risultati quantitativi.

Il sistema è basato su specifica reazione antigene-anticorpo, che a sua volta si lega ad un fluoroforo.

Utilizza diversi tipi di campione come: siero, plasma, feci o sangue intero.



Non ha bisogno di condizioni ambientali particolari per lavorare essendo portatile e flessibile ad eseguire le letture dei diversi analiti ovunque.

Validazione contro i principali sistemi di immunometria quali Immulite, Tosoh

La calibrazione avviene attraverso la lettura del chip.
Essa è sempre aggiornata per analita e per lotto di produzione ed è presente in ogni kit,
tutti da 10 test.

Letture dei test tra i 3 e i 15 minuti.

Opzioni di connessione. porta USB, porta LAN, porta LIS e porta di connessione per PC.

Elenco delle metodiche

	Codice	Metodica	Volume Campione	Tipo Campione	Tempo di lettura
Ormoni	V405	Cortisolo Canino e Felino	75 µL	Sangue e Siero	15 min
	V407	Emoglobina A1c Canina e Felina	10 µL	Sangue	5 min
	V402	Progesterone Canino	75 µL	Sangue e Siero	15 min
	V403	T4 Canino e Felino	75 µL	Sangue e Siero	15 min
	V404	TSH Canino e Felino	75 µL	Sangue e Siero	15 min
Marcatori Speciali	V412	Cistatina-C Canina	10 µL	Sangue e Siero	10 min
	V413	Cistatina-C Felina	10 µL	Sangue e Siero	10 min
	V406	D-Dimero Canino e Felino	10 µL	Sangue e Plasma	5 min
	V408	Lipase Pancreatica Specifica Canina	75 µL	Sangue e Siero	15 min
	V409	Lipase Pancreatica Specifica Felina	75 µL	Sangue e Siero	15 min
	V410	NT-proBNP Canino	75 µL	Sangue e Siero	10 min
	V411	NT-proBNP Felino	75 µL	Sangue e Siero	10 min
V434	SDMA Felino e Canino	75 µL	Sangue e Siero	10 min	
Infiammazioni	V400	Proteina C Reattiva Canina	10 µL	Sangue e Siero	3 min
	V435	Siero Amiloide A Equina	10 µL	Sangue e Siero	3 min
	V401	Siero Amiloide A Felina	10 µL	Sangue e Siero	3 min
	V434	SDMA Canino e Felino	10 µL	Sangue, Siero e Plasma	5 min
Immuno	V429	Epatite Ab - Parvovirus Ab - Cimurro Ab canino	10 µL	Sangue e Siero	10 min
	V430	Calicivirus Ab - Panleucopenia Ab - Herpes Ab felina	10 µL	Sangue e Siero	10 min
Malattie Infettive	V424	Cimurro Canino	75 µL	Feci	10 min
	V423	Coronavirus Canino	75 µL	Feci	10 min
	V425	Parvovirus Canino	75 µL	Feci	10 min


Risultati in 4 passaggi




Lettura
ID Chip



Aggiunta
Campione

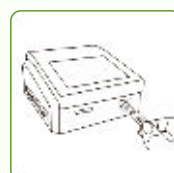

Inserire
Test Card

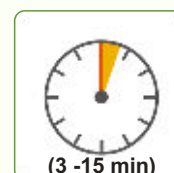

Elaborazione
Risultato
(3 -15 min)

FINECARE_YG_101_032025_v5